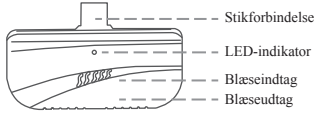


SINOX Sinox-Europe A/S Troensevej 11, DK-9220 Aalborg Tel.: +45 98 15 33 66 info@sinox-europe.com www.sinox-europe.com SXT1110 SXT1120 Brugervejledning Mini Smart Alkohol Sensor  1. Om produktet Denne mini smarte alkohol-sensor skal bruges sammen med en smartphone eller en anden mobil enhed. Den kan måle koncentrationen af alkohol i en persons uåndningsluft, og de relevante data kan vises i appen. Læs venligst denne manual omhyggeligt og brug produktet korrekt. DK_1	2. Forsigtighed 1) Måleresultaterne fra dette produkt er kun til reference. For handlinger, der er forbudt ved lov, såsom spirituskørsel, påtager producenten, forhandlerne og tilknyttede personale sig intet ansvar. 2) På grund af individuelle forskelle i fysisk tilstand kan den samme mængde alkohol give forskellige måleresultater. 3) Alkohol optages fra fordelingssystemet til blodbanen efter ca. 20 minutter. Det anbefales derfor at måle alkoholniveauet 20 minutter efter indtagelse af alkohol. Umiddelbar måling efter indtagelse viser alkoholkoncentrationen i drøkken – ikke blodets alkoholkoncentration. 4) For at opnå mere præcise målinger anbefales det at vente mindst 3 minutter mellem målingerne. 5) Mål ikke i blæsevej, da luftstrømme i omgivelserne kan påvirke resultatet. 3. Opbevaring 1) Placer ikke produktet i områder med kraftige lugte. 2) Opbevar produktet væk fra direkte sollys og undgå ekstreme temperaturer. 3) Hold produktet uden for børns rækkevidde. 4) Hvis produktet ikke bruges i mere end en måned, bør det opbevares i sin originale emballage. DK_2	4. Tekniske specifikationer <table> <tr><td>Måleområde</td><td>0-2%(g/l) or 0-200 BAC</td></tr> <tr><td>Arbejdsstrøm</td><td><24mA @5V</td></tr> <tr><td>Arbejdsændring</td><td>5.0V(Type-C™) 3.3V(Lighting™)</td></tr> <tr><td>Arbejdstemperatur</td><td>0°C ~ 40°C</td></tr> <tr><td>Opbevaringstemperatur</td><td>0°C ~ 30°C</td></tr> <tr><td>Produktstørrelse</td><td>55*34*9mm</td></tr> <tr><td>Produktvægt</td><td>7.5g</td></tr> <tr><td>Kommunikation</td><td>BLE 5.0</td></tr> </table> 5. Produktbeskrivelse  DK_3	Måleområde	0-2%(g/l) or 0-200 BAC	Arbejdsstrøm	<24mA @5V	Arbejdsændring	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lighting™)	Arbejdstemperatur	0°C ~ 40°C	Opbevaringstemperatur	0°C ~ 30°C	Produktstørrelse	55*34*9mm	Produktvægt	7.5g	Kommunikation	BLE 5.0	6. App Download iPhone-vejledning: Søg efter "AirSensorTool" i App Store for at downloade appen, eller scan QR-koden nedenfor. Når appen er downloadet og installeret, skal du åbne din telefons Indstillinger, vælge Apps og derefter vælge AirSensorTool-appen. Giv tilladelse til Bluetooth. Appen er nu klar til brug.  DK_4	Android-vejledning: "AirSensorTool" er tilgængelig i Huawei AppGallery, Xiaomi, App Store og Samsung Galaxy Store, eller scan QR-koden nedenfor. For at sikre, at appen fungerer korrekt, skal du give de nødvendige tilladelser ved at trykke på "Enig" eller "Tillad" under installationen.  DK_5	Google Play Store vejledning: Søg efter "AirCheck+" i Google Play Store for at downloade appen, eller scan QR-koden nedenfor.  DK_6	7. Sådan bruges produktet 1) Tilsæt produktet til den smarte enhed (f.eks. smartphone) og åbn appen. Følg instruktionerne på skærmen. Når appen har fundet produktet, tryk på Forbind. 2) Når appen åbner målegrænsefladen, følg denne rækkefølge: - Tryk på "Start" og vent ca. 10 sekunder på initialisering og opvarmning. - Når skærmen viser "Please Blow", hold en afstand på 2-3 cm fra blæsendetaget og pust kraftigt i 4 sekunder. - Måleresultatet vises efter endt blæsing. 3) Måleresultatstabel <table> <tr> <th>Resultat(%)</th> <th>Resultat(BAC)</th> <th>Indikatorfarve</th> </tr> <tr> <td>0-0.2%(g/L)</td> <td>0-20 BAC</td> <td>Grøn</td> </tr> <tr> <td>0.2%-0.8%(g/L)</td> <td>20-80 BAC</td> <td>Gul</td> </tr> <tr> <td>0.8%-2%(g/L)</td> <td>80-200 BAC</td> <td>Rød</td> </tr> </table> Bemærk: Forskellige lande bruger forskellige måleenheder. For at gøre oplevelsen mere praktisk kan du skifte måleenhed i appen ved at trykke på testresultatet. Ændring af måleenheden påvirker ikke målenøjagtigheden – kun visningen. DK_7	Resultat(%)	Resultat(BAC)	Indikatorfarve	0-0.2%(g/L)	0-20 BAC	Grøn	0.2%-0.8%(g/L)	20-80 BAC	Gul	0.8%-2%(g/L)	80-200 BAC	Rød	8. Andre bemærkninger Når produktet tages ud af emballagen for første gang, eller efter længere tids inaktivitet, kan der sidde rester af gas eller urenheder på sensoren. I så fald anbefales det at trykke gentagne gange på "Start" for at forvarme og rense produktet for at opnå den bedste ydeevne. 9. Advarsel Testresultaterne er kun vejledende, og de endelige resultater er baseret på hospitalets blodprøve. Producenten og sælgeren påtager sig ikke noget juridisk ansvar for ulykker forårsaget af kørsel under påvirkning eller andre handlinger fra brugere af dette produkt. Køb ikke under påvirkning af alkohol! DK_8
Måleområde	0-2%(g/l) or 0-200 BAC																																		
Arbejdsstrøm	<24mA @5V																																		
Arbejdsændring	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lighting™)																																		
Arbejdstemperatur	0°C ~ 40°C																																		
Opbevaringstemperatur	0°C ~ 30°C																																		
Produktstørrelse	55*34*9mm																																		
Produktvægt	7.5g																																		
Kommunikation	BLE 5.0																																		
Resultat(%)	Resultat(BAC)	Indikatorfarve																																	
0-0.2%(g/L)	0-20 BAC	Grøn																																	
0.2%-0.8%(g/L)	20-80 BAC	Gul																																	
0.8%-2%(g/L)	80-200 BAC	Rød																																	
SINOX Sinox-Europe A/S Troensevej 11, DK-9220 Aalborg Tel.: +45 98 15 33 66 info@sinox-europe.com www.sinox-europe.com SXT1110 SXT1120 Anvænderhandbok Mini Smart Alkoholmätare  1. Om produkten Denna mini smarta alkoholmätare måste användas tillsammans med en smartphone eller annan mobil enhet. Den kan upptäcka alkoholhalten i en persons utandningsluft, och de relevanta uppgifterna kan visas i appen. Läs denna handbok noggrant och använd produkten på rätt sätt. SE_1	2. Varningar 1) Måteresultaten från denna produkt är endast avsedda som referens. Vid lagbrott, såsom rattfylleri, rattövervakaren, återförsäljare eller annan personal inget ansvar. 2) På grund av individuella skillnader i kroppens tillstånd kan samma mängd alkohol ge olika måteresultat. 3) Alkohol absorberas i blodet cirka 20 minuter efter intag. Det rekommenderas därför att mäta alkoholhalten 20 minuter efter att du har druckit. En omedelbar mätning efter att du druckit visar alkoholkoncentrationen i drycken, inte blodets alkoholhalt. 4) För mer exakta resultat bör du vänta minst 3 minuter mellan mätningarna. 5) Mål inte i blåsiga förhållanden, eftersom luftflöde kan påverka måteresultatet. 3. Förvaring 1) Förvara inte produkten på platser med starka lugter. 2) Håll produkten borta från direkt solljus och undvik extrema temperaturer. 3) Förvara produkten utom räckhåll för barn. 4) Om produkten inte används under mer än en månad, förvara den i sin originalförpackning. SE_2	6. App Download Instruktioner för iPhone: Sök efter "AirSensorTool" i App Store för att ladda ner appen, eller skanna QR-koden nedan. När appen har laddats ner och installerats, öppna telefonens Inställningar, välj Appar och välj sedan AirSensorTool-appen. Tillåt Bluetooth. Appen är nu redo att användas.  SE_4	Instruktioner för Android: "AirSensorTool" finns tillgänglig i Huawei AppGallery, Xiaomi, App Store och Samsung Galaxy Store, eller skanna QR-koden nedan. För att appen ska fungera korrekt, godkänn de nödvändiga behörigheterna genom att trycka på "Godkänn" eller "Tillåt" under installationen.  SE_5	Instruktion för Google Play Store: Sök efter "AirCheck+" i Google Play Store för att ladda ner appen, eller skanna QR-koden nedan.  SE_6	7. Användning 1) Anslut produkten till den smarta enheten (t.ex. en smartphone) och öppna appen. Följ instruktionerna i appen. När appen har hittat produkten, tryck på Anslut. 2) När appen har gått in i mätläge, följ denna ordning: - Tryck på "Start" och vänta cirka 10 sekunder för initialisering och uppvärmning. - När skärmen visar "Please Blow" (Blås), håll ett avstånd på 2–3 cm från blåsintaget och blås kraftigt i 4 sekunder. - Resultatet visas efter att du blåst klart. 3) Resultattabell <table> <tr> <th>Resultat(%)</th> <th>Resultat(BAC)</th> <th>Indikatorfärg</th> </tr> <tr> <td>0-0.2%(g/L)</td> <td>0-20 BAC</td> <td>Grön</td> </tr> <tr> <td>0.2%-0.8%(g/L)</td> <td>20-80 BAC</td> <td>Gul</td> </tr> <tr> <td>0.8%-2%(g/L)</td> <td>80-200 BAC</td> <td>Röd</td> </tr> </table> Observera: Olika	Resultat(%)	Resultat(BAC)	Indikatorfärg	0-0.2%(g/L)	0-20 BAC	Grön	0.2%-0.8%(g/L)	20-80 BAC	Gul	0.8%-2%(g/L)	80-200 BAC	Röd																		
Resultat(%)	Resultat(BAC)	Indikatorfärg																																	
0-0.2%(g/L)	0-20 BAC	Grön																																	
0.2%-0.8%(g/L)	20-80 BAC	Gul																																	
0.8%-2%(g/L)	80-200 BAC	Röd																																	